

BLØD PUDE TIL HØJET TOILETSÆDE LM

TILSIGTET BRUG:

Den bløde pude til hævet toiletsæde LM er et komplementært tilbehør til RTS i højden 5 cm, 10 cm og 15 cm, med og uden låg. Det gør RTS mere komfortabel, hvilket gør sædet blødt og hyggeligt. Den bløde pude omslutter RTS og beskytter den delvist mod snavs og gør det lettere at holde den ren. Derudover giver den krøllede overflade mere friktion, hvilket reducerer skridrisikoen for brugeren. Den bløde pude kan nemt påføres og fjernes fra RTS.

INDIKATIONER OG KONTRAINDIKATIONER:

De hævede toiletsæder LM henvender sig til ældre mennesker, kørestolsbrugere, personer med nedsat bevægelighed i lænden, knæet eller hoften og til alle dem, der kan have svært ved at sætte sig ned og rejse sig fra toiletkummen. Under siddende deformeres den bløde pudes ømme materiale, hvilket sikrer en forøgelse af brugerstøttefladen og giver mulighed for bedre at fordele kropsvægten. Dette gør dette tilbehør særligt velegnet, hvis brugeren lider af liggesår eller sygdomme, der kan forårsage det, såsom diabetes. Evnen til at sidde selvstændigt er påkrævet under brug. Det anbefales ikke at bruge RTS i tilfælde af perceptionsforstyrrelser eller balanceproblemer, mens du sidder.

SIKKERHEDSADVARSLER OG INDIKATIONER:

- Den maksimale brugervægt angivet på billedet nedenfor må ikke overskrides.
- Før hver brug skal du sørge for, at RTS er i en stabil position på toilettet og korrekt fastgjort på det ved hjælp af det medfølgende specielle monteringsstilbehør. Sørg også for, at den bløde pude omslutter RTS'en korrekt.
- Før du påfører den bløde pude, skal du sikre dig, at RTS er ren og tør.
- Under monteringen skal du nøje overholde det, der er vist i brugervejledningen.
- Modificer ikke RTS'en og dens komponenter på nogen måde.
- Brug ikke RTS, hvis den er beskadiget eller ændret på nogen måde. Revner og deformationer kan i høj grad påvirke enhedens ydeevne og sikkerhed.
- Vær sikker på, at RTS-højden er sådan, at den gør brugen af den let og sikker for brugeren.
- Undgå stillinger, der holder kropsvægten for meget fremad under brug. Forkerte positioner kan føre til ustabilitet og væltning af RTS.
- RTS'en og den bløde pude må ikke opbevares udendørs.

VEDLIGEHOLDELSE INFO:

Produktvedligeholdelsen består af rengørings- og sanitetsprocedurer. For at garantere sikker brug og tilstrækkelig hygiejnstandard bør brugeren udføre disse procedurer før hver brug.

Brugeren skal sikre sig enhedens strukturelle integritet. Følg nedenstående trin for rengøring og sanitetsprocedurer: 1. Der skal bæres handsker.

2. Fjern det tydelige snavs inden for at fortsætte med den mest nøjagtige desinfektion.

3. Brug vand eller ikke-aggressivt rengøringsmiddel til rengøringsproceduren.

4. Tør af med en tør og ren klud.

Den bløde pude skal rengøres strengt i hånden.

KRAV TIL GENBRUG:


Produktet er velegnet til genbrug andre brugere. Før genbrug af andre, skal produktet rengøres og desinficeres korrekt. Inden produktet overdrages til andre, skal produktet kontrolleres af kvalificerede forhandlere.

KORREKT BORTSKAFFELSESPROCEDURE:

Smid ikke produktet ud i det normale husholdningsaffald. Spørg din lokale myndighed på forhånd om den korrekte og miljøvenlige måde at bortskaffe det på.

HÆNDELSESRAPPORTERING:

Hvis der var en alvorlig hændelse med denne enhed, skal du kontakte producenten af dette produkt på info@almglobaldesign.com og den ansvarlige myndighed i dit land.

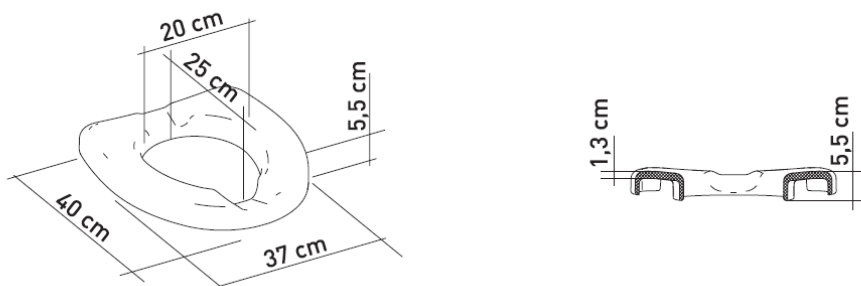

BLØD PUDE TIL HØJET TOILETSÆDE LM



MADE IN ITALY



2 YEARS
GUARANTEE



LM Global Design Ltd.

Suite 123, The Capel Building,
Mary's Abbey,
Dublin 7, D07 VY68, Ireland

(t) +353 (01) 6874012
(w) www.lmglobaldesign.com
(e) info@lmglobaldesign.com