

**MOPEDIA®**

MA RS810-815-817 01\_A\_04-2018

**SEDILI DA BAGNO  
MANUALE DI ISTRUZIONI**

---

**BATH BENCH  
INSTRUCTION MANUAL**

## INDICE

<b>1. CODICI .....</b>	<b>pag.3</b>
<b>2. INTRODUZIONE .....</b>	<b>pag.3</b>
<b>3. DESTINAZIONE D'USO .....</b>	<b>pag.3</b>
<b>4. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE.....</b>	<b>pag.3</b>
<b>5. AVVERTENZE GENERALI .....</b>	<b>pag.3</b>
<b>6. SIMBOLOGIA UTILIZZATA .....</b>	<b>pag.4</b>
<b>7. DESCRIZIONE GENERALE .....</b>	<b>pag.4</b>
7.1 RS810.....	pag.4
7.2 RS815.....	pag.4
7.3 RS817 .....	pag.4
<b>8. MONTAGGIO .....</b>	<b>pag.4</b>
8.1 RS810 .....	pag.4
8.2 RS815 .....	pag.5
8.3 RS817.....	pag.5
<b>9. PRIMA DI OGNI USO .....</b>	<b>pag.5</b>
<b>10.AVVERTENZE PER L'UTILIZZO.....</b>	<b>pag.5</b>
<b>11. MODO D'USO .....</b>	<b>pag.5</b>
11.1 RS810 .....	pag.6
11.2 RS815.....	pag.6
11.3 RS817 .....	pag.6
<b>12. PULIZIA E DISINFEZIONE .....</b>	<b>pag.6</b>
12.1 Pulizia .....	pag.6
12.2 Disinfezione .....	pag.6
<b>13. CONDIZIONI DI SMALTIMENTO .....</b>	<b>pag.6</b>
<b>14. CARATTERISTICHE TECNICHE .....</b>	<b>pag.6</b>
<b>15. GARANZIA.....</b>	<b>pag.7</b>
<b>16. RIPARAZIONI .....</b>	<b>pag.7</b>
16.1 Riparazioni in garanzia.....	pag.7
16.2 Riparazioni di un prodotto non coperto dalla garanzia .....	pag.7
16.3 Prodotti non difettosi .....	pag.8
<b>17. RICAMBI.....</b>	<b>pag.8</b>
<b>18. CLAUSOLE ESONERATIVE.....</b>	<b>pag.8</b>

**CE** Dispositivo medico di classe I D. Lgs 24/02/97 n. 46  
attuazione della direttiva CEE 93/42 e successive modifiche

## 1. CODICI

- RS810** Sedile per vasca in plastica 1 maniglia  
**RS815** Sedile per bagno pieghevole  
**RS817** Sedile per bagno rotondo

## 2. INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto un sedile per bagno/doccia della linea MOPEDIA by Moretti. I sedili per bagno/doccia Moretti sono stati progettati e realizzati per soddisfare tutte le vostre esigenze per un utilizzo pratico, corretto e sicuro. Questo manuale contiene dei piccoli suggerimenti per un corretto uso del dispositivo da voi scelto e dei preziosi consigli per la vostra sicurezza. Si consiglia di leggere attentamente la totalità del presente manuale prima di usare il sedile. In caso di dubbi vi preghiamo di contattare il rivenditore, il quale saprà aiutarvi e consigliarvi correttamente.

NOTA: Controllare che tutte le parti del prodotto non abbiano subito danni durante la spedizione. In caso di danni non utilizzare il prodotto e contattare il rivenditore per ulteriori istruzioni.

## 3. DESTINAZIONE D'USO

Gli ausili bagno/doccia della linea MOPEDIA by Moretti sono progettati per facilitare la seduta di persone disabili o con difficoltà motorie durante le operazioni di pulizia in bagno.

### ATTENZIONE!



- È vietato l'utilizzo del seguente dispositivo per fini diversi da quanto definito nel seguente manuale
- Moretti S.p.A. declina qualsiasi responsabilità su danni derivanti da un uso improprio del dispositivo o da un uso diverso da quanto indicato nel presente manuale
- Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al dispositivo e al seguente manuale senza preavviso allo scopo di migliorarne le caratteristiche

## 4. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

La MORETTI S.p.A. dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che i prodotti fabbricati ed immessi in commercio dalla stessa MORETTI S.p.A. e facenti parte della famiglia SOLLEVATORI sono conformi alle disposizioni applicabili della direttiva 93/42/CEE sui DISPOSITIVI MEDICI. A tal scopo la MORETTI S.p.A. garantisce e dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità quanto segue:

1. I dispositivi in oggetto soddisfano i requisiti essenziali richiesti dall'allegato I° della direttiva 93/42/CEE come prescritto dall'allegato VII° della suddetta direttiva.
2. L'elenco completo dei dispositivi in oggetto viene indicato nell'allegato A della dichiarazione.
3. I dispositivi in oggetto NON SONO STRUMENTI DI MISURA.
4. I dispositivi in oggetto NON SONO DESTINATI AD INDAGINI CLINICHE.
5. I dispositivi in oggetto vengono commercializzati in confezione NON STERILE.
6. I dispositivi in oggetto sono da considerarsi come appartenenti alla classe I°.
7. NON È CONSENTITO utilizzare e/o installare i dispositivi in oggetto al di fuori della destinazione d'uso prevista dalla MORETTI S.p.A.
8. La MORETTI S.p.A. mantiene e mette a disposizione delle Autorità Competenti la documentazione tecnica comprovante la conformità alla Direttiva 93/42/CEE.







## 5. AVVERTENZE GENERALI

- Per un utilizzo corretto del dispositivo fare riferimento attentamente al seguente manuale
- Mantenere il prodotto imballato lontano da qualsiasi fonte di calore in quanto l'imballo

è fatto di cartone

- La vita utile del dispositivo è determinata dall'usura di parti non riparabili e/o sostituibili
- Prestare sempre molta attenzione alla presenza di parti in movimento che potrebbero causare intrappolamenti agli arti e lesioni personali
- Prestare sempre attenzione alla presenza di bambini

## 6. SIMBOLOGIA UTILIZZATA

	Codice prodotto
	Marchio CE
	Produttore
	Mese e anno di produzione
	Leggere il manuale per le istruzioni
	Condizioni di smaltimento

## 7. DESCRIZIONE GENERALE

### 7.1 RS810

Sedile per vasca in plastica antiscivolo con maniglia e fori per l'acqua. Regolabile in larghezza per una maggiore adattabilità.

### 7.2 RS815

Sedia per bagno pieghevole con struttura in acciaio verniciato e seduta in plastica, pieghevole per ridurre l'ingombro durante lo stoccaggio. Puntali in gomma antiscivolo.

### 7.3 RS817

Sedile per bagno rotondo, con struttura in alluminio anodizzato


## 8. MONTAGGIO

### 8.1 RS810


Il prodotto viene fornito smontato ed è facile assemblarlo senza l'ausilio di attrezzi. Composto da:

- Seduta (1 pz)
  - Fermi (4 pz)
  - Maniglia (1 pz)
  - Viti
- Posizionare i fermi sotto la seduta e fissare tramite viti per mezzo di un cacciavite o una monetina
  - Introdurre la maniglia nei fori presenti all'estremità del sedile e fissare tramite le viti

L'impugnatura deve essere rivolta verso il centro del sedile (Fig.1).

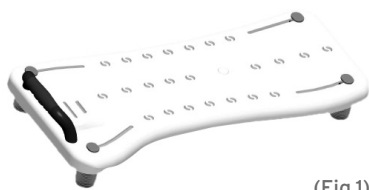

(Fig.1)

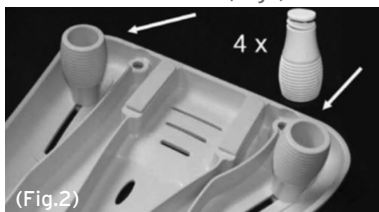

(Fig.2)

Regolazione del sedile

(Immagine a scopo illustrativo)

- Capovolgere il sedile, allentare le 4 viti in modo che si possano muovere
- Far scorrere le 4 viti verso il centro del sedile da vasca in modo che possano facilmente adattarsi alla vasca da bagno
- Capovolgere di nuovo il sedile in modo da inserirlo nella vasca con la maniglia rivolta verso la parete. (La maniglia deve sempre essere sul lato del muro)
- Posizionare il sedile da vasca nella posizione ottimale
- Far scorrere i tacchetti in modo che tocchino l'interno della vasca e stringere le viti ad alette
- Capovolgere di nuovo il sedile in modo che i piedini siano rivolti verso l'alto e regolare verso l'esterno per circa 2 millimetri su ciascun tacchetto. Ora serrare i supporti in modo che essi non si muovono facilmente
- Girare il sedile da vasca correttamente e premere delicatamente verso il basso nel bagno (non forzare). Se il sedile scorre lungo la vasca, potrebbe essere necessario regolare i supporti ulteriormente verso l'esterno. Per fare questo ripetere i passaggi da 2 a 7

## 8.2 RS815

L'ausilio viene fornito già montato.


## 8.3 RS817

L'ausilio viene fornito smontato. Risulta di facile montaggio.

Nell'imballo sono presenti:

- Seduta con struttura (1pz)
- Gambe (4pz)

Inserire le 4 gambe nella struttura del sedile posizionandole all'altezza desiderata.

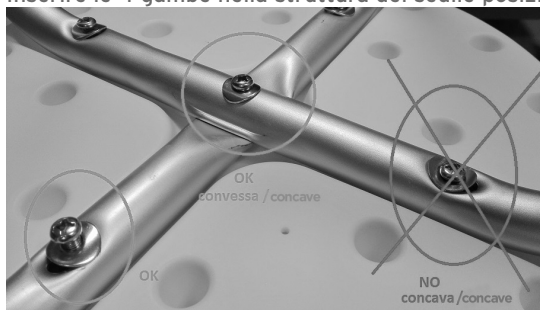

## 9. PRIMA DI OGNI USO

- Verificare sempre lo stato di usura delle parti in modo tale da garantire un utilizzo del dispositivo in totale sicurezza per persone e cose
- Verificare il corretto assemblaggio del dispositivo

## 10. AVVERTENZE PER L'UTILIZZO

Il fabbricante e il distributore declinano ogni responsabilità per conseguenze derivanti da un uso improprio del prodotto.

- Aiutare sempre il paziente con difficoltà di deambulazione a posizionarsi sul sedile
- Non usare con pazienti che superano il peso massimo riportato sull'etichetta prodotto posta sulla struttura dell'ausilio
- Evitare movimenti repentini durante il posizionamento
- Fare attenzione a pavimenti bagnati, umidi o scivolosi, potrebbero rendere difficile il posizionamento del paziente
- Non conservare il prodotto all'esterno. Verificare periodicamente la stabilità del prodotto ed il corretto fissaggio delle viti e lo stato delle protezioni in gomma

- In caso di dubbi sull'utilizzo, sulla regolazione o sulla manutenzione del prodotto, contattare il rivenditore

 **Non superare per nessun motivo la portata massima ammessa!**

## 11. MODO D'USO

### 11.1 RS810

- Appoggiare il sedile sulla vasca e stringere i fermi in modo da renderlo stabile
- Posizionare la maniglia dal lato opposto al punto di accesso alla vasca
- Se necessario aiutare il paziente a posizionarsi sul sedile
- Utilizzare la maniglia come ausilio per muoversi e posizionarsi correttamente sul sedile

### 11.2 RS815

Posizionare il sedile ed aprirlo su una superficie piana e regolare. Controllare la stabilità del sedile prima dell'utilizzo.

### 11.3 RS817

#### Regolazione dell'altezza

Premere il fermo per regolare la seduta sfilando la canna e portandola in corrispondenza dei fori in base all'altezza desiderata e alla manovrabilità soggettiva del paziente stesso. Riposizionare il fermo sul foro per bloccare la canna. Controllare che tutte le quattro gambe abbiano la stessa altezza. Posizionare il sedile su una superficie piana e regolare. Controllare la stabilità del sedile prima dell'utilizzo.

## 12. PULIZIA E DISINFEZIONE

### 12.1 Pulizia

Per pulire il prodotto, utilizzare esclusivamente un panno imbevuto di acqua ed asciugare con un panno pulito ed asciutto, o con acqua tiepida e sapone neutro. Non usare sostanze abrasive, acidi, alcol, detergenti a base di cloro, disinfettanti ed acetone, perché tali sostanze provocano l'abrasione delle parti in plastica e l'arrugginimento delle superfici metalliche.

Il fabbricante non sarà responsabile per il danneggiamento causato dall'utilizzo di materiali che possano deteriorare la superficie del prodotto o da corrosivi chimici utilizzati durante la pulizia.

### 12.2 Disinfezione

Se necessario, effettuare la disinfezione del prodotto utilizzando un delicato detergente disinfettante.

## 13. CONDIZIONI DI SMALTIMENTO


In caso di smaltimento del dispositivo non usare mai i normali sistemi di conferimento dei rifiuti solidi urbani. Si raccomanda invece di smaltire il dispositivo attraverso le comuni isole ecologiche comunali per le previste operazioni di riciclo dei materiali utilizzati.

## 14. CARATTERISTICHE TECNICHE

### RS810

\*Dimensioni:  L: 41÷63 cm  P: 31,5 cm  H: 18 cm

 Peso: 3,1 kg

 Portata massima: 160 kg

**RS815**

\*Dimensioni:  L: 49 cm  P: 38 cm  H: 47÷51 cm

Seduta: 49x29 cm

 Peso: 3,2 kg

 Portata massima: 130 kg

**RS817**

\*Dimensioni:  L: 35 cm  P: 35 cm  H: 36÷53,5 cm

Seduta: Ø 31 cm

 Peso: 1,5 kg

 Portata massima: 110 kg

\* Le misure si riferiscono alle dimensioni di massimo ingombro

**15. GARANZIA**

Tutti i prodotti Moretti sono garantiti da difetti di materiale o fabbricazione per un periodo di 2 (due) anni dalla data di vendita del prodotto, salvo eventuali esclusioni e limitazioni specificate di seguito. Questa garanzia non è valida in caso di uso improprio, abuso o modifica del prodotto e per la mancata aderenza alle istruzioni per l'uso. La corretta destinazione d'uso del prodotto è indicata nel manuale d'uso.

Moretti non è responsabile di danni risultanti, di lesioni personali o quant'altro causato o relativo all'installazione e/o all'uso dell'apparecchiatura non scrupolosamente conforme alle istruzioni riportate nei manuali per l'installazione, il montaggio e l'uso.

Moretti non garantisce i prodotti Moretti contro danni o difetti nelle seguenti condizioni: calamità naturali, operazioni di manutenzione o riparazione non autorizzate, danni derivanti da problemi dell'alimentazione elettrica (dove prevista), utilizzo di parti o componenti non forniti da Moretti, mancata aderenza alle linee guida e istruzioni per l'uso, modifiche non autorizzate, danni di spedizione (diversa dalla spedizione originale da Moretti), oppure dalla mancata esecuzione della manutenzione così come indicato nel manuale.

Non sono coperti da questa garanzia componenti usurabili se il danno è da imputarsi al normale utilizzo del prodotto.

**16. RIPARAZIONI**
**16.1 Riparazione in garanzia**

Nel caso in cui un prodotto Moretti presenti difetti di materiale o fabbricazione durante il periodo di garanzia, Moretti valuterà con il cliente se il difetto del prodotto è coperto dalla garanzia. Moretti, a sua insindacabile discrezione, può sostituire o riparare l'articolo in garanzia, presso un rivenditore Moretti specificato o presso la propria sede. I costi della manodopera relativi alla riparazione del prodotto possono essere a carico di Moretti se si determina che la riparazione ricade nell'ambito della garanzia. Una riparazione o sostituzione non rinnova né proroga la garanzia.

**16.2 Riparazione di un prodotto non coperto dalla garanzia**

Si può restituire, affinché sia riparato, un prodotto non coperto dalla garanzia solo dopo aver ricevuto autorizzazione preventiva dal servizio clienti Moretti. I costi della manodopera e di spedizione relativi a una riparazione non coperta dalla garanzia saranno completamente a carico del cliente o del rivenditore. Le riparazioni su prodotti non coperti dalla garanzia sono

garantite per 6 (sei) mesi, a decorrere dal giorno in cui si riceve il prodotto riparato.

### 16.3 Prodotti non difettosi

Il cliente sarà avvisato se, dopo avere esaminato e provato un prodotto restituito, Moretti conclude che il prodotto non è difettoso. Il prodotto sarà restituito al cliente e saranno a suo carico i costi di spedizione dovuti alla restituzione.

### 17. RICAMBI

I ricambi originali Moretti sono garantiti per 6 (sei) mesi a decorrere dal giorno in cui si riceve il ricambio.

### 18. CLAUSOLE ESONERATIVE

Salvo quanto specificato espressamente in questa garanzia ed entro i limiti di legge, Moretti non offre nessun'altra dichiarazione, garanzia o condizione, espressa o implicita, comprese eventuali dichiarazioni, garanzie o condizioni di commerciabilità, idoneità per uno scopo particolare, non violazione e non interferenza. Moretti non garantisce che l'uso del prodotto Moretti sarà ininterrotto o senza errori. La durata di eventuali garanzie implicite che possano essere imposte dalle norme di legge è limitata al periodo di garanzia, nei limiti delle norme di legge. Alcuni stati o paesi non permettono limitazioni sulla durata di una garanzia implicita oppure l'esclusione o la limitazione di danni accidentali o indiretti in relazione a prodotti per i consumatori. In tali stati o paesi, alcune esclusioni o limitazioni di questa garanzia possono non applicarsi all'utente. La presente garanzia è soggetta a variazioni senza preavviso.



## CERTIFICATO DI GARANZIA

Prodotto \_\_\_\_\_

Acquistato in data \_\_\_\_\_

Rivenditore \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ Località \_\_\_\_\_

Venduto aA \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ Località \_\_\_\_\_

 MORETTI S.P.A.

Via Bruxelles, 3 - Melegnano 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

[www.morettispa.com](http://www.morettispa.com) email: [info@morettispa.com](mailto:info@morettispa.com)

MADE IN P.R.C.



## INDEX

<b>1. CODES .....</b>	<b>pag.10</b>
<b>2. INTRODUCTION.....</b>	<b>pag.10</b>
<b>3. INTENDED USE .....</b>	<b>pag.10</b>
<b>4. EC DECLARATION OF CONFORMITY .....</b>	<b>pag.10</b>
<b>5. GENERAL WARNINGS.....</b>	<b>pag.11</b>
<b>6. SYMBOLS.....</b>	<b>pag.11</b>
<b>7. GENERAL DESCRIPTION .....</b>	<b>pag.11</b>
7.1 RS810.....	pag.11
7.2 RS815.....	pag.11
7.3 RS817 .....	pag.11
<b>8. ASSEMBLING .....</b>	<b>pag.11</b>
8.1 RS810.....	pag.11
8.2 RS815 .....	pag.12
8.3 RS817.....	pag.12
<b>9. BEFORE USE .....</b>	<b>pag.12</b>
<b>10. CAUTIONS FOR USE.....</b>	<b>pag.12</b>
<b>11. HOW TO USE .....</b>	<b>pag.13</b>
11.1 RS810 .....	pag.13
11.2 RS815 .....	pag.13
11.3 RS817.....	pag.13
<b>12. CLEANING AND DISINFECTION .....</b>	<b>pag.13</b>
12.1 Cleaning .....	pag.13
12.2 Disinfection .....	pag.13
<b>13. CONDITIONS OF DISPOSAL .....</b>	<b>pag.13</b>
13.1 General conditions of disposal.....	pag.13
<b>14. TECHNICAL FEATURES.....</b>	<b>pag.13</b>
<b>15. WARRANTY.....</b>	<b>pag.14</b>
<b>16. REPAIR .....</b>	<b>pag.14</b>
16.1 Warranty repair.....	pag.14
16.2 Repair not covered by warranty.....	pag.14
16.3 Non-defective device .....	pag.14
<b>17. SPARE SPARTS.....</b>	<b>pag.14</b>
<b>18. EXEMPT CLAUSES .....</b>	<b>pag.15</b>

**CE** I Class Medical Device according to Directive 93/42/EEC  
and further modifications

## 1. CODES

<b>RS810</b>	Plastic bathtub seat with handle
<b>RS815</b>	Foldable bath bench
<b>RS817</b>	Bath stool

## 2. INTRODUCTION

Thank you for purchasing a MOPEDIA bath products by Moretti S.p.A. product range. This user's manual provides some suggestions as how to correctly use the product you have chosen and gives some valuable advice for your safety. Please read through the manual carefully before using the product. Should you have any queries, please contact your retailer for advice and assistance. In case of doubts, we recommend to contact the dealer who can help and advice you properly.

**NOTE:** Check if any part has shipping damages and test before using. In case of damage, do not use the device. Contact your dealer for further instructions.

## 3. INTENDED USE

The bath chair by Moretti is intended for disabled patient assistance in bath tub

### CAUTION!



- Do not use the product for a purpose not indicated in this manual
- Moretti S.p.A. declines all responsibilities for any consequences resulting from an incorrect use of this product and from unauthorized alteration to the frame of the product
- The manufacturer reserves the right to change the information contained in this document without previous notice.

## 4. EC DECLARATION OF CONFORMITY

Moretti S.p.A. hereby declares, under its own exclusive responsibility, that the products manufactured and sold by Moretti S.p.A. and belonging to the bath aids category are in compliance with the applicable provisions outlined in the Medical Devices Directive 93/42/EEC and further modifications.

To this end Moretti S.p.A. guarantees and declares as follows, under its own responsibility:

1. The devices in question satisfy the essential requirements of Annex I of directive 93/42/EEC as prescribed by Annex VII of the above directive
2. A complete list of the concerned devices is mentioned in the enclosure A of the declaration
3. The devices in question ARE NOT MEASUREMENT DEVICES
4. The devices in question ARE NOT INTENDED FOR CLINICAL INVESTIGATION
5. The devices in question are sold in NON STERILE packing
6. The devices in question should be considered as belonging to class I
7. DO NOT use/install the devices in question for any other purpose than that expressly indicated by Moretti S.p.A.
8. Moretti S.p.A. maintains and submits the documentation certifying conformity with Directive 93/42/EEC to the proper authorities and further modifications







## 5. GENERAL WARNINGS

- DO NOT use this product or any available optional equipment without first completely reading and understanding this instruction manual. If you are unable to understand the warnings, cautions or instructions, contact a healthcare professional, dealer or technical

personnel before attempting to use this equipment, otherwise injury or damage may occur

- Keep the packed bath chair away from heat sources
- SERVICE LIFE- the product use limit is defined by the wear of the parts
- ALWAYS keep hands and fingers clear of moving parts to avoid injury
- DO NOT allow children to play on or operate the bath chair

**6. SYMBOLS**

-  REF Product code
-  CE Mark
-  Manufacturer
-  LOT Month and year of manufacture
-  Read the manual for instructions
-  Conditions of disposal

**7. GENERAL DESCRIPTION**

**7.1 RS810**

Plastic bathtub seat with anti-slip plastic handle and holes for the water. Adjustable width for better adaptability.

**7.2 RS815**

Folding bath chair with painted steel structure and plastic seat, folding to save space during storage. Non-slip rubber tips.

**7.3 RS817**

Round shape bath seat. With anodized aluminum frame.


**8. ASSEMBLING**

**8.1 RS810**


The product is supplied unassembled and it is easy to assemble without the use of any tools. Is composed by:

- Seat (1 pc)
- Stoppers (4 pcs)
- Handle (1 pc)
- Screws

Screw the four large plastic screws on the underside of the seat. Tighten them well with a screwdriver or a small coin. To assemble the handle, position the seat with the stoppers facing downwards, introduce the handle into the holes at the ends of the seat. The handle should face the center of the seat. (Fig.1)

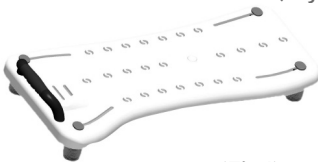

(Fig.1)

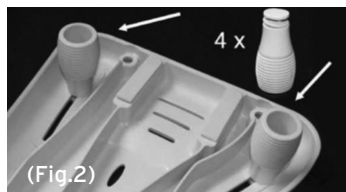

(Fig.2)

Seat adjustment  
(Only purpose picture)

- Turn the seat, loosen the 4 screws so that they can move
- Slide the 4 screws into the center of the seat centre so that they can easily adapt to the bathtub
- Turn to the seat again so you place in the tub with the handle facing the wall.  
(The handle must always be on the side of the wall)
- Place the bath seat in the best position.
- Slide the cleats so that they touch the inside of the tub and tighten the thumbscrews
- Flip back the seat so that the cleats are facing upwards and adjust outward to about 2 mm on each cleat. Now tighten the brackets so that they do not move easily.
- Turn the hot seat from the right and press down gently in the bathroom (not force). If the seat slides along the tub, you may need to adjust the supports further outward. To do this, repeat steps from 2 to 7


### 8.2 RS815

The product is supplied assembled.

### 8.3 RS817

The product is supplied unassembled and it is easy to assemble. In the package you will find:

- Round seat with frame (1 pcs)
- Legs (4pcs)

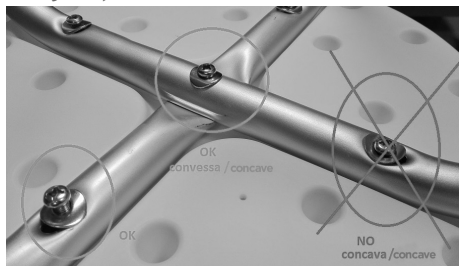

## 9. BEFORE USE

- Check if the frame is damaged in order to guarantee a safe use for people and things
- Check the correct assembly of the device

## 10. CAUTIONS FOR USE

The manufacturer and distributor are not responsible for any responsibility for the consequences of improper use of the product.

- Always help the patient with walking difficulties to position themselves on the seat
- Do not use with patients who exceed the maximum weight shown on the label placed on the product frame
- Avoid sudden movements during positioning
- Be careful on wet floors, on wet or slippery surfaces, it could make difficult the patient positioning
- Do not store the product outside. Periodically check the stability of the product and the correct fastening screws and the status of protections rubber
- In case of doubt for the use, the adjustment or the maintenance of the product, please contact your dealer

 **Do not exceed the maximum load capacity for any reason!**

## 11. HOW TO USE

### 11.1 RS810

- Place the seat in the tub and tighten the stoppers to make it stable
- Place the handle on the side opposite to the point of access to the tub
- If necessary help the patient to position on the seat
- Use the handle as an aid to move and position themselves correctly in the seat

### 11.2 RS815

Position the seat and open it on a smooth flat surface. Check the stability of the seat before use.

### 11.3 RS817

#### Height adjustment

Press the pin to adjust the seat by removing the pole and putting it into the holes to the desired height and the maneuverability of the patient. Return the stop in the hole to lock it. Check that all four legs are of the same height.

Place seat on a flat, level surface. Check the stability of the seat before use

## 12. CLEANING AND DISINFECTION

### 12.1 Cleaning

To clean the aid and the structure use a solution of alcohol and neutral soap (in equal parts) mixed with water. Do not use abrasive substances, acids, alcohol, chlorine-based cleaners, disinfectants and acetone when cleaning, because these substances cause the abrasion of the plastic surfaces and rusting of metal surfaces.

The manufacture company cannot be held responsible for the damage that is caused by using materials that could damage the product surface or corrosive chemicals during cleaning.

### 12.2 Disinfection

If you need to disinfect the product use a common disinfectant neutral detergent.

## 13. CONDITIONS OF DISPOSAL


In case of disposal don't use the inserting container for municipal waste. We recommend to dispose the bath chair in the appropriate disposal areas for recycling.

## 14. TECHNICAL FEATURES

### RS810

\*Dimension:  L: 41÷63 cm  W: 31,5 cm  H: 18 cm

 Weight: 3,1 kg


 Max loading weight: 160 kg


### RS815

\*Dimension:  L: 49 cm  W: 38 cm  H: 47÷51 cm

Sitting: 49x29 cm

 Weight: 3,2 kg

 Max loading weight: 130 kg

**RS817**\*Dimension:  L: 35 cm  W: 35 cm  H: 36+53,5 cmSitting:  Ø 31 cm Weight: 1,5 kg Max loading weight: 110 kg

\* The measurements refer to the overall dimensions

**15. WARRANTY**

Moretti products are guaranteed from material or manufacturing faults for a period of (two) 2 years from the purchasing date, subject to any limitations and exclusions specified below. The warranty does not apply in case of damages caused by improper use, abuse or modification of the product, and the warranty will not be valid if the instructions for use are not strictly followed. The correct intended use of the device is specified in this manual.

Moretti is not responsible for damages resulting from personal injury or otherwise caused by or in relation to wrong installation or improper use. Moretti Moretti does not guarantee the products against damage or defects in the following conditions: natural disaster, not authorized maintenance or repair, damage due to power supply problems (where provided) use of spare parts not supplied by Moretti, improper use, not authorized alteration, shipping damage (other than original shipment by Moretti), or in case of insufficient maintenance as indicated in the manual. The warranty doesn't cover components subject to wear and tear during the correct use of the device.

**16. REPAIR****16.1 Warranty repair**

In the event that a product Moretti to be defective in material or manufacturing faults during the warranty period, Moretti will confirm with customer if the fault can be covered from warranty. Moretti, in its sole discretion, can repair or replace the item under warranty at a Moretti dealer or at Moretti location. The labor cost for the repair may be charged to Moretti if the repair is covered by warranty. Repair or replacement does not renew or extend the warranty

**16.2 Repair not covered by warranty**

A product not covered by warranty can be returned for repairing only after receiving prior authorization from Moretti customer service. The labor and shipping costs for a repair not covered by warranty will be fully borne by the customer or dealer. Repairs of products not covered by warranty are warranted for six (6) months from the date you receive the product repaired.

**16.3 Non-defective device**

The customer will be informed if, after having examined and tested returned product, Moretti claims that the product is not defective. In this case the good will be returned to the customer, all shipping costs will be paid by customer.

**17. SPARE SPARTS**

The original Moretti spare parts are guaranteed for 6 (six) months from the receiving date.

### 18. EXEMPT CLAUSES

Except as expressly specified in this warranty and within the limits of the law, Moretti does not offer any representation, warranty or condition, express or implied, including any representations, warranties or conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, non-infringement and interference. Moretti does not warrant that the use of the product Moretti will be uninterrupted or error free.

The duration of any implied warranties that may be imposed by law are limited to the warranty period, within the limits of the law. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages in connection with products for consumers. In such states or countries, certain disclaimers and limitations of this warranty may not apply to you. This warranty is subject to change without notice.



## WARRANTY CERTIFICATE

Product \_\_\_\_\_

Purchasing date \_\_\_\_\_

Authorized dealer \_\_\_\_\_

Street \_\_\_\_\_ Place \_\_\_\_\_

Sold to \_\_\_\_\_

Street \_\_\_\_\_ Place \_\_\_\_\_

 MORETTI S.P.A.

Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

[www.morettispa.com](http://www.morettispa.com) email: [info@morettispa.com](mailto:info@morettispa.com)

MADE IN P.R.C.



Via Bruxelles, 3 - Meleto  
52022 Cavriglia (Arezzo)  
Tel. +39 055 96 21 11

Fax. +39 055 96 21 200  
[www.morettispa.com](http://www.morettispa.com)  
[info@morettispa.com](mailto:info@morettispa.com)